

OptiCare



Pentru îngrijirea optimă a pacientului

Saltea integrată


Noua tehnologie
smart pentru
prevenirea
escarelor de
decubit.



90%

din escarele de
decubit pot fi
prevenite*

pentru ATI

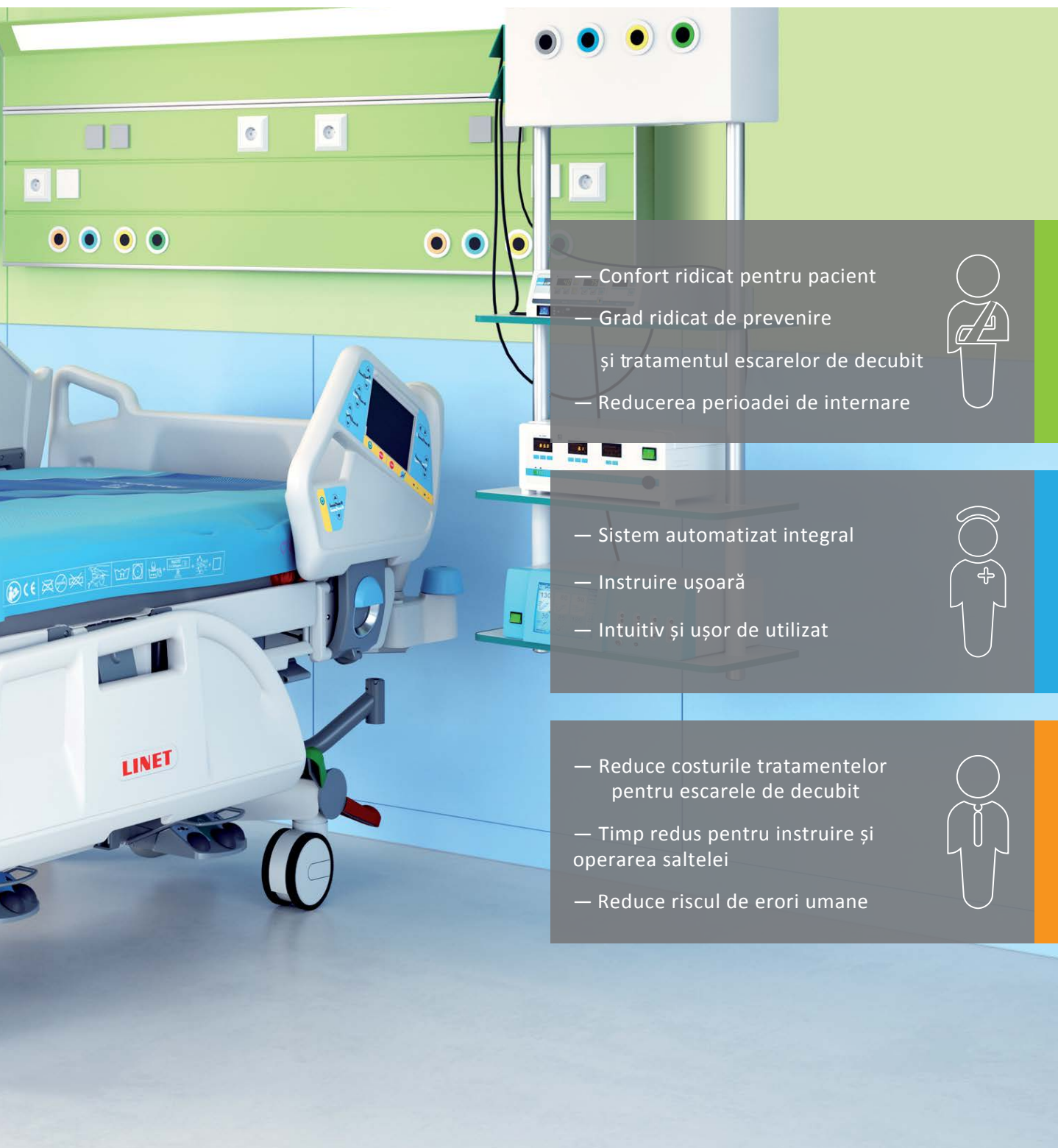

- Confort ridicat pentru pacient
- Grad ridicat de prevenire și tratamentul escarelor de decubit
- Reducerea perioadei de internare



Pacient

- Sistem automatizat integral
- Instruire ușoară
- Intuitiv și ușor de utilizat



Personal

- Reduce costurile tratamentelor pentru escarele de decubit
- Timp redus pentru instruire și operarea saltelei
- Reduce riscul de erori umane



Management

Tehnologie smart

ÎNGRIJIRE OPTIMIZATĂ

Îngrijirea îmbunătățită este furnizată prin tehnologia de ultimă generație. Setările saltelei sunt optimizate automat pentru fiecare pacient în funcție de greutatea și înălțimea pacientului, precum și în funcție de poziția pacientului pe saltea.


În fiecare an, **2.5** milioane de pacienți sunt tratați pentru escare de decubit în SUA*



SETARE COMPLET AUTOMATĂ A PRESIUNII

Sistemul detectează corpul pacientului pe pat. Acesta inițiază automat procesul de optimizare, economisind astfel timpul necesar în mod normal pentru asistentele medicale pentru a seta parametri saltelei. Timpul necesar pentru instruirea asistentei medicale este de asemenea redus, ceea ce înseamnă mai mult timp dedicat îngrijirii pacientului.

SALTEA ACTIVĂ OBIȘNUITĂ

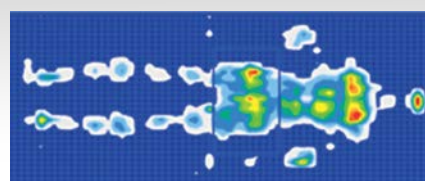

CONFORT SUPERIOR. CORPUL SE CUFUNDĂ IAR SALTEAUA SE MODELEAZĂ ÎN JURUL CORPULUI

Distribuția uniformă pe întreaga suprafață a corpului elimină presiunea excesivă la punctele de risc datorită învelișului ce se modelează în jurul corpului.

- CUFUNDARE: nivelul de adâncime atins de pacient pe saltea
- MODELARE: gradul la care salteaua se modelează în jurul corpului pacientului.



immersion




envelopment

Sistem de optimizare cu senzori: Șase senzori aflați în saltea detectează nivelul de cufundare al pacientului și facilitează ajustarea automată a presiunii în întreaga saltea pentru a se putea adapta la greutatea, înălțimea și poziția fiecărui pacient. Presiunea asupra corpului pacientului este scăzută pe toate părțile acestuia și distribuită optim.



OPTICARE

Grad de cufundare mărit

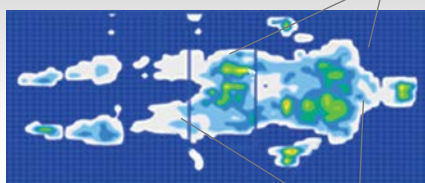

O mai bună distribuție a presiunii

REDUCE RISCUL ERORILOR UMANE

Tehnologia de reglare automată a presiunii reglează în mod continuu setările saltelei, eliminând necesitatea intervenției personalului și reducând astfel în mod semnificativ riscul de eroare umană.

Sistem complet integrat

Noua saltea terapeutică OptiCare este complet compatibilă cu paturile pentru ATI – Multicare și Eleganza 5.

BENEFICIILE SISTEMULUI INTEGRAT

- Controale intuitive pentru saltea, integrate în afișajul patului
- Fără compresor extern
- Mai ușor de transportat

RCP rapid și eficient

- Salteaua poate fi dezumflată prin simpla apăsare a butonului electronic CPR de pe panoul de control integrat în pat. Alternativ, aceasta poate fi dezumflată manual prin mecanismul integrat în saltea. După dezumflare, pacientul se află pe o platformă de saltea fermă, care facilitează tehnici eficiente de resuscitare.
- Dacă nu este umflată mai devreme de o asistentă medicală, după șazecei de minute salteaua va reveni automat la modul de distribuție optimă a presiunii sau la modul de dezumflare maximă, limitând astfel toți factorii care pot avea un impact negativ asupra prevenirii sau a tratamentului escarelor de decubit.



Multicare + OptiCare



Eleganza 5 + OptiCare

* ARHITECTURĂ DESCHISĂ
permite schimbarea rapidă cu
orice altă saltea activă sau pasivă



PANOU DE CONTROL 2-ÎN-2

Controalele atât pentru saltea cât și pentru pat sunt integrate într-un singur panou de control încorporat în pat.

Ușor de
utilizat

Simplu
și
intuitiv

Un singur
punct de
control

Eficiență sporită

Salteaua este echipată cu o gamă completă de funcții sofisticate care îmbunătățesc efectele terapeutice și preventive ale presiunii optimizate.

Testat în
practică

Agencia pentru Cercetare și Calitate în domeniul sănătății, care oferă orientări pentru prevenirea escarelor de decubit, recomandă evitarea unui mediu ambiant cu o umiditate relativă mai mică de 40% pentru a evita uscarea pielii.

* Prevenirea escarelor de decubit la adulți: Ghiduri de Practică Clinică nr. 3, Publicația AHCPN Nr. 92-0047. Rockville MD. Agenția pentru sănătate și servicii publice. Mai 1992.



Tratamentul escarelor de decubit este de

2.5x mai

scump față de prevenția acestora*



MANAGEMENTUL MICROCLIMATIC (MCM)


În contextul escarelor de decubit, microclimatul se referă de obicei la condițiile de temperatură și umiditate care pot influența pielea. OptiCare ajută la menținerea termoreglării naturale prin circulația aerului prin suprafața saltelei.

— Ajută la controlul căldurii și umidității pielii pacientului, care este o parte importantă în menținerea viabilității țesuturilor

MODUL PENTRU SOMN

Acest mod reduce viteza și zgomotul pentru a minimiza perturbarea pacientului în timpul somnului. Eficacitatea clinică a saltelei este menținută chiar și în modul pentru somn.

Ghid de Referință Rapid

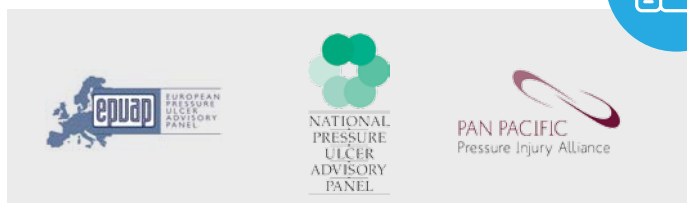


Îngrijire rapidă și eficientă

EXTENSIE AUTOMATĂ PENTRU PICIOARE

Secțiunea pentru călcâie a saltei poate fi reglată automat atunci când cadrul patului este extins.


- Ușor de utilizat
- Nu este nevoie să deschideți husa pentru a regla secțiunea
- Nivel excelent de control al infecțiilor

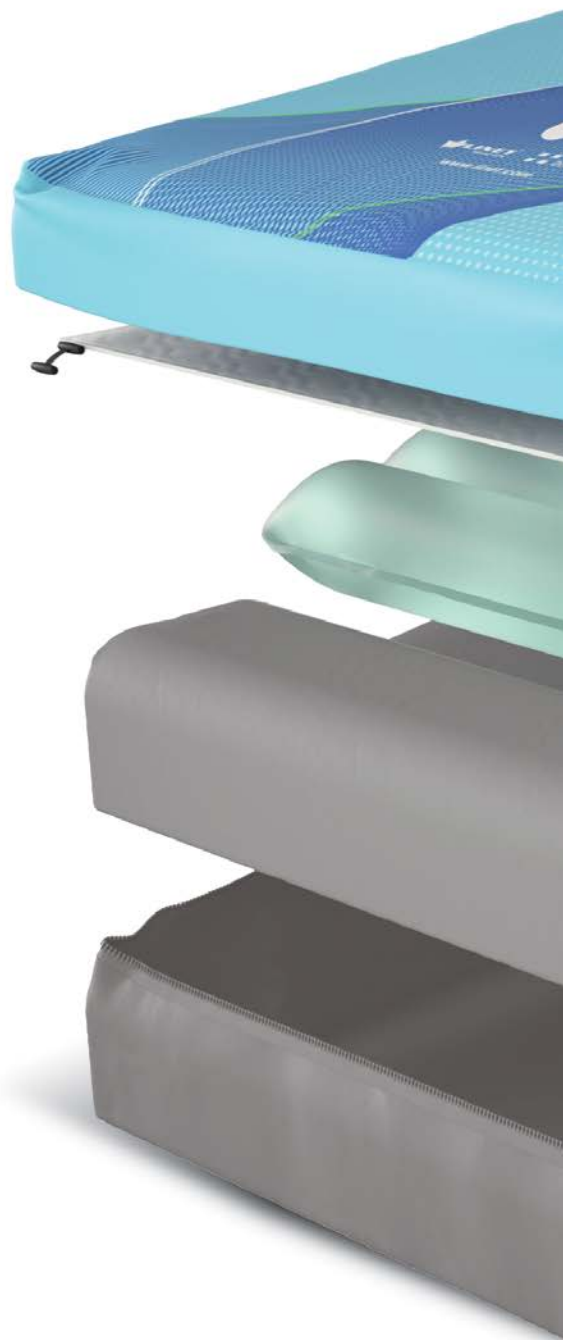

ZONA CĂLCÂIELOR

Secțiunea călcâielor are o pantă de 7 grade și este căptușită cu o spumă mai moale, care conferă pacientului confort sporit. Acest lucru reduce semnificativ riscul apariției escarelor la nivelul călcâielor.



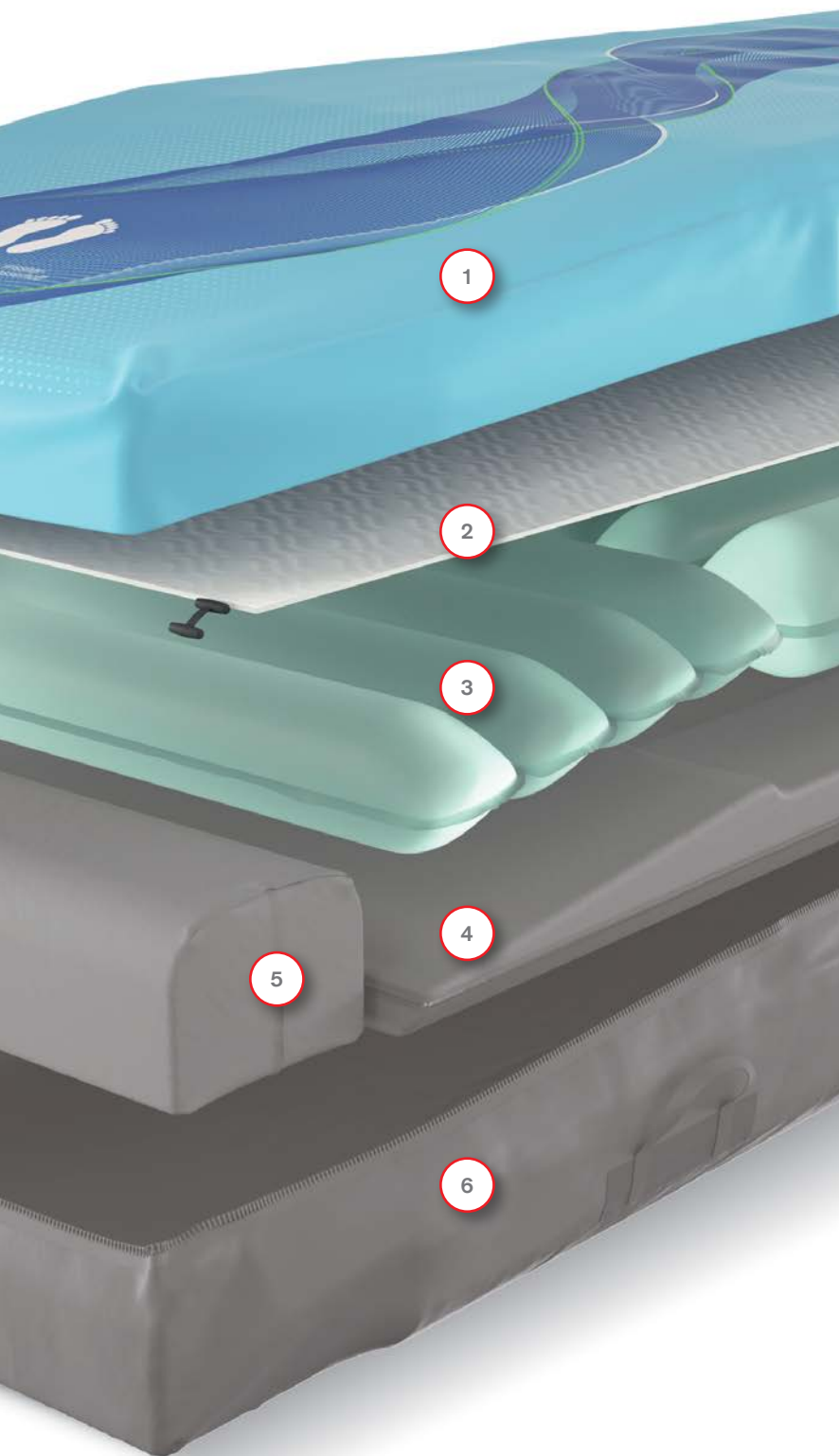

STRATURI SALTEA

- 1 Husă
- 2 Strat de confort
- 3 Seturi de celule de aer
- 4 Strat inferior de siguranță
- 5 Spumă moale pentru secțiunea călcâielor
- 6 Husă nivel inferior

CURĂȚARE UȘOARĂ

Secțiunea superioară a husei este confecționată dintr-un material cu întindere în două direcții și permeabilitate ridicată la umiditate și vapori (MVP)

- Fermoar 360 grade ce permite îndepărtarea ușoară pentru curățare și înlocuire
- Fermoarul este acoperit cu un material impermeabil pentru a proteja salteaua împotriva infiltrării fluidului.

OptiCare

Pacient

- Confort ridicat pentru pacient
- Grad ridicat de prevenire și tratamentul escarelor de decubit
- Reducerea perioadei de internare



- Sistem complet automatizat
- Instruire ușoară
- Intuitiv și ușor de utilizat.



Personal

Management

- Reduce costurile tratamentelor pentru escarele de decubit
- Timp redus pentru instruire și operarea salteii
- Reduce riscul de erori umane



 wissner-
bosserhoff

 **LINET**[®]

Members of LINET Group

LINET spol. s r. o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Republica Cehă

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

